

AIRTECH

バイオセーフティカプセル 感染症患者搬送用陰圧ストレッチャー

BS-Cap-III

緊急感染症患者の隔離搬送用フードを全身ソフトフードタイプとしました

1. 高性能 ULPA フィルター採用

- ・ 細菌やウイルスを、フッ素樹脂 (PTFE) フィルターにて 99.9995% 以上捕集します。

2. 軽量、コンパクト

- ・ 全身ソフトフードタイプの為、未使用時はコンパクトに収納可能です。
- ・ 支持金具を外すと、標準ストレッチャーとして使用出来ます。
- ・ 使用済みのフード部は、フィルター部を含めて焼却処理可能です。

3. 乾電池にて運転可能 (単 2 型 × 8 本)

- ・ オプションとして、AC100V 電源、肩掛け式大容量バッテリーにも対応可能です。
(乾電池では約 1.5 時間運転可能です)
(車内電源用 (12V) ケーブルは付属です)

4. その他

- ・ 救急車の除振台に固定出来ます。
- ・ 対応ストレッチャーはファerno製 Model4080 です。




装置外観



ULPA フィルター部




構成部品一式 (別途ストレッチャー必要)

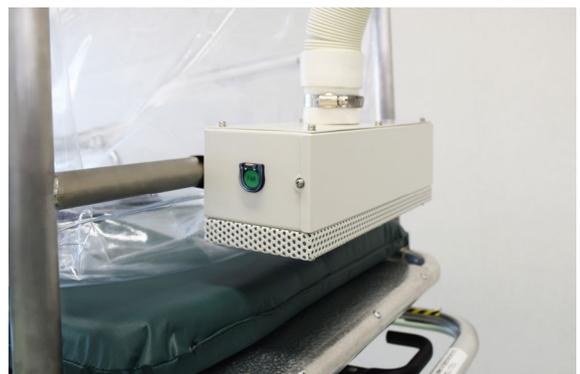

排気用送風機ユニット (乾電池駆動)

寸法図

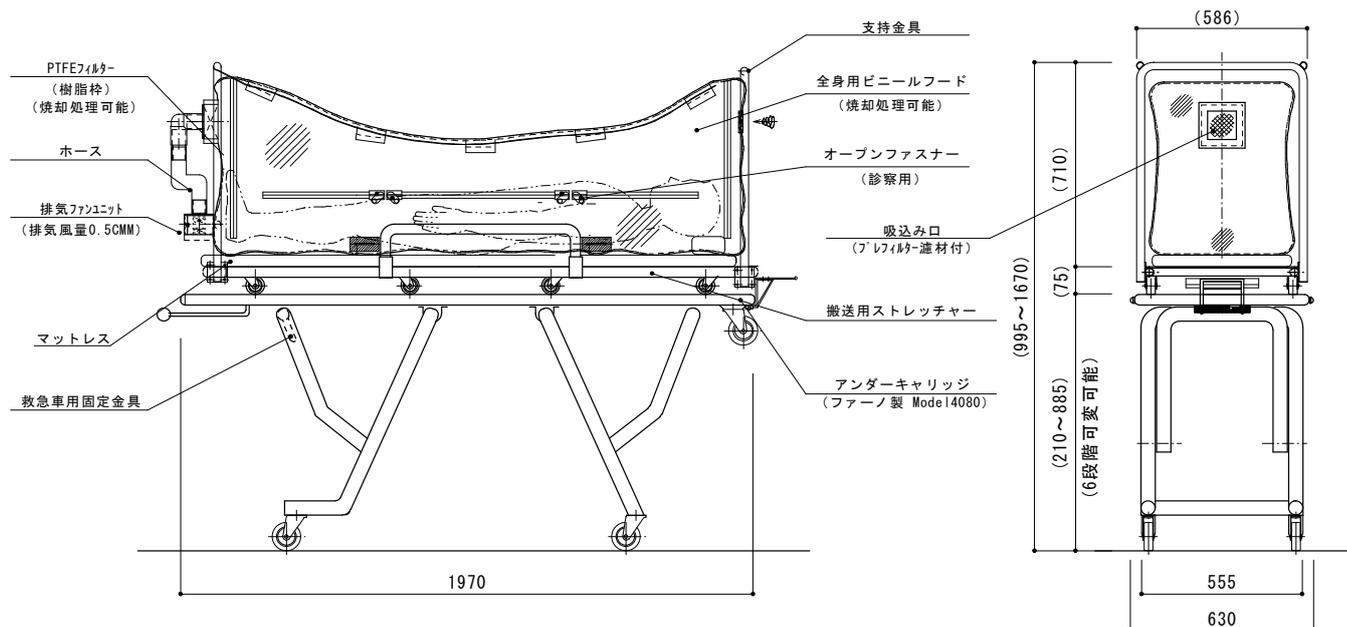

仕様

型式	BS-Cap-III
集塵効率	0.1~0.2 μ m 粒子にて 99.9995%以上
集塵要素	PTFE ULPA フィルター(排気)
風量	約 0.5m ³ /min
運転	乾電池によるバッテリー運転、又は外部車両電源(DC12V)
電源	単2型アルカリ乾電池×8本(付属品)
	DC12V 車両電源(ケーブル付属品)
	AC100、1 ϕ (オプション対応)
	肩掛け式大容量バッテリー(オプション対応)
重量	約 55kg(陰圧フード部:約 20kg、アンダーキャリッジ:約 35kg)
外形寸法	W1970×D630×H995~1670mm
構造	排気ユニット :アルミ製
	フィルター :PTFE ULPA フィルター(樹脂製枠)
	フード :無色透明ビニールカーテン
その他	最大荷重は約 130kg 以下

日本エアテック株式会社

本社	〒110-8686 東京都台東区入谷1丁目14番9号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号(タカノボルビル)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目18番11号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町4番28号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目11番11号(第1リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町2番14号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2丁目12番8号(真鍋ビル)	TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284
南九州営業所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3丁目38番28号(ショーヤ105号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <http://www.airtech.co.jp>

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。