

AIRTECH

バイオセーフティカプセル 感染症患者搬送用陰圧ストレッチャー

BS-Cap-4

緊急感染症患者の隔離搬送用フードに院内向けのタイプが登場しました

1. ストレッチャーへの着脱

- ・ 金具固定部にノブボルトを採用し、ストレッチャーフレームへの取付を容易としました。
- ・ カプセル未使用時は取り外して、通常のストレッチャーとしてご使用いただけます。

2. 対応ストレッチャー

- ・ 標準ストレッチャーはパラマウントベッド社製 KK-736B です。(別途オプションにてKK-725シリーズへの取り付けも可能です。)
- ・ ストレッチャーの高さ調整は無段階で行えます。
- * 上記ストレッチャーは救急車への搭載には対応しておりません。

3. 乾電池によるバッテリー運転

- ・ 乾電池(単2型8本)で約1.5時間運転可能です。
- ・ 付属のアダプターケーブルでAC100V電源での運転も行えます。


4. その他

- ・ プライバシー性を高めた白色フードと、視認性の良い透明フードの2種類を用意しました。(ご注文時選択)
- ・ 使用済みフード及びフィルターは焼却処理可能です。




装置外観(白色フード搭載時)

高性能 ULPA フィルター
(樹脂製、捕集効率 99.9995%以上)

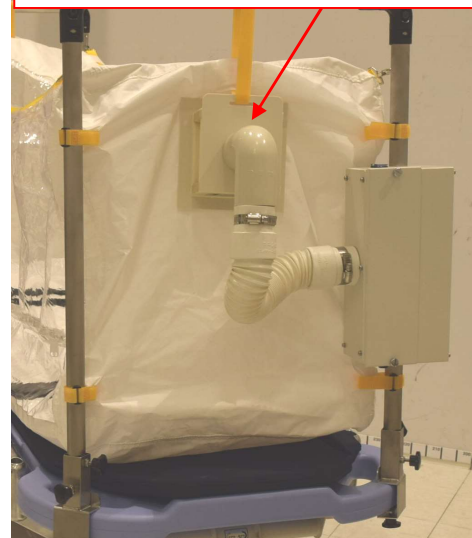

排気用ユニット(透明フード装着時)

寸法図

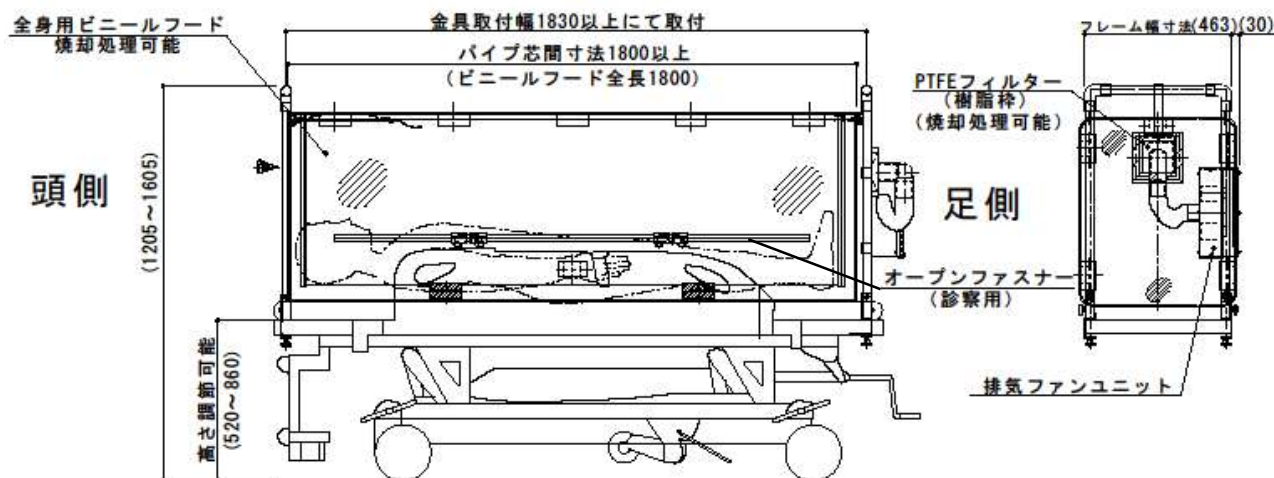

仕様

型式	BS-Cap-4
集塵効率	0.1~0.2 μ m 粒子にて 99.9995%以上
集塵要素	PTFE ULPA フィルター(排気)
風量	約 0.5m ³ /min 以上
運転	乾電池によるバッテリー運転、又は外部電源(AC100V)
電源	単 2 型アルカリ乾電池×8 本(付属品)
	AC100V アダプターケーブル(付属品)
重量	約 77kg(ストレッチャーを含む合計)
フード寸法	W1800×D500×H600mm
構造	排気ユニット : 鋼板製
	フィルター : PTFE ULPA フィルター(樹脂製枠)
	フード : 無色透明ビニールカーテン+白色ターポリン又は透明ビニールカーテン

日本エアテック株式会社

本 社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(タカノボルビル)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒815-0035 福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)	TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284
南九州営業所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <http://www.airtech.co.jp>

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。