

AIRTECH

卓上型バイオロジカル セーフティキャビネット クラスⅡA2 型

BHC-T701 Ⅱ A2

小型、安価で本格的な気流のバイオロジカルセーフティキャビネットです。

1. 特長

- ・クラスⅡA2 型の卓上安全キャビネット
- ・狭いスペースにも設置可能
- ・薬局、病院等の薬品調合用や生物学実験等、幅広い用途に使用可能
- ・DC ブラシレスモーター、LED 照明により省エネ


2. JIS-K3800:2009 の準拠品です

- ・当社内の風速バランス試験に合格
- ・最適な気流によりエア―バリアーを形成
- ・専用の排気フードを使い、室外排気仕様も可能
- ・作業性を重視した傾斜型スライドシャッターを採用

3. 架台付、室外排気も可能な多彩なオプション


「各種オプション品」

- ・電子着火式ガスバーナー
- ・オートピペット
- ・専用ハンガーパイプ
- ・鋼板製専用架台
- ・室外排気チャンバー

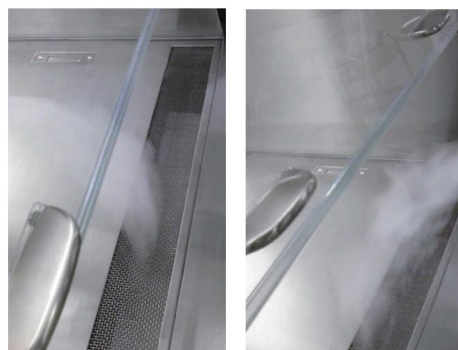

最適な気流により確実なエア―バリアーを形成。
内部への流入及び外部への流出を防ぎます。

寸法図

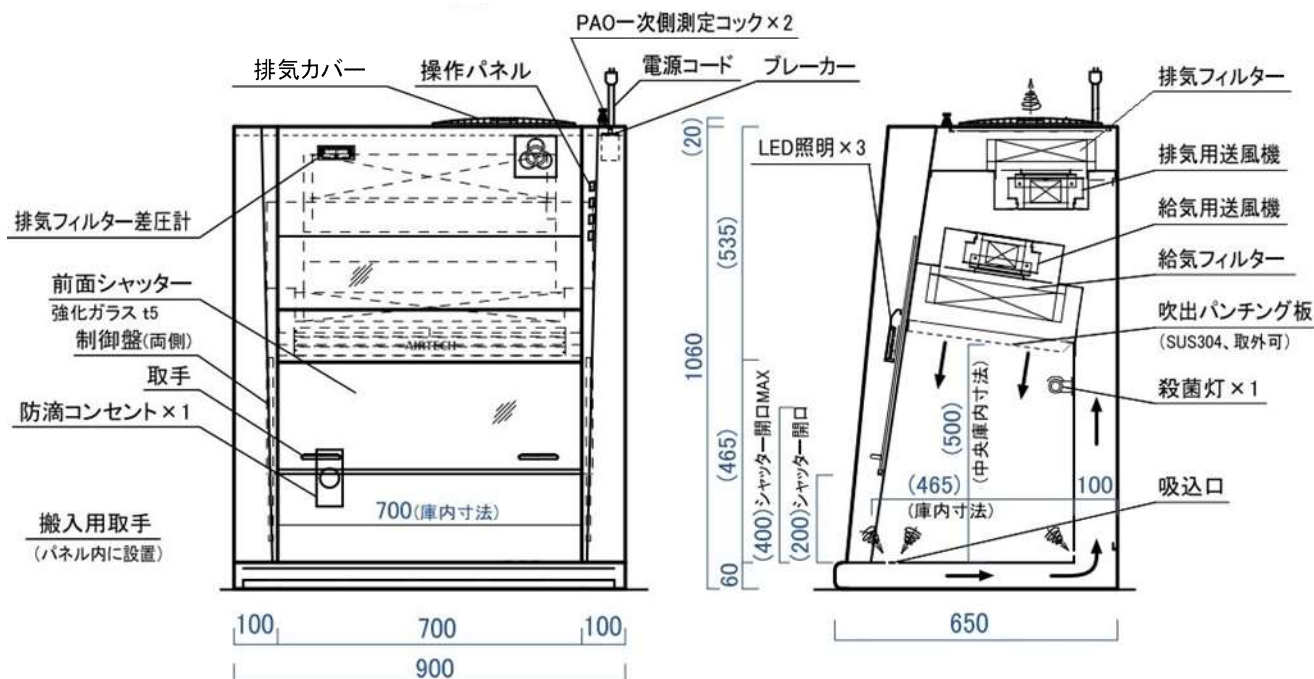

仕様

型式	BHC-T701 II A2
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素	給気/排気: HEPA フィルター プレフィルター: 丸型サランネットフィルター
処理風量	給気: 5.7m ³ /min、排気: 4.4m ³ /min
吹出風速	平均 0.32m/s
流入風速	平均 0.53m/s
電源	AC100V 1φ 50/60Hz
消費電力	約 160VA (ファン+照明運転時、コンセント容量は含まず)
重量	約 90Kg
外形寸法	W900×D650×H1080mm [庫内寸法 W700×D465×H500]
最小搬入寸法	W900×D650×H1210mm (各寸法に 20mm 程度の余裕をみてください)
構造・仕上	本体: 鋼板製焼付塗装、作業室: ステンレス製
照明	LED 8W×3 灯
殺菌灯	15W×1 灯 (インバーター式)
オプション	ガスバーナー、屋外排気チャンバー、オートピペット、鋼板製専用架台、その他

- **屋外排気仕様(オプション)**: 屋外排気チャンバーと屋外排気ファンを追加し、屋外排気仕様に変更できます。
- 上記の仕様は予告なく変更する場合がございます。

日本エアーテック株式会社

本 社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(タカノボルビル)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒815-0035 福岡県福岡市南区向野 2 丁目 12 番 8 号(真鍋ビル)	TEL 092-553-1288 FAX 092-561-7284
南九州営業所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <http://www.airtech.co.jp>

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

CE5004976-CV2108515