

# AIRTECH

## 卓上型全排気安全キャビネット

BHC-T700 II B2

クラス II B2 型

国産初、小型で卓上設置可能な全排気安全キャビネットです。

### 1. 特長


- ・クラス II B2 型の卓上安全キャビネット
- ・狭いスペースにも設置可能
- ・省排気風量の為、空調負荷を低減
- ・薬局、病院等の薬品調合用や生物学実験等、幅広い用途に使用可能
- ・DC ブラシレスモーター、長寿命 LED 照明により省電力
- ・作業性を重視した傾斜型スライドシャッターを採用
- ・HEPA フィルター、プレフィルター等重要部品は装置前面より保守、点検が可能

### 2. JIS-K3800:2009 準拠


- ・洗練された気流制御で作業面の汚染空気の漏洩を防止
- ・HEPA フィルターにより無菌操作が可能

### 3. 多彩なオプション品

- ・オートピペット
- ・専用ハンガーパイプ
- ・鋼板製専用架台
- ・ダクト接続部材

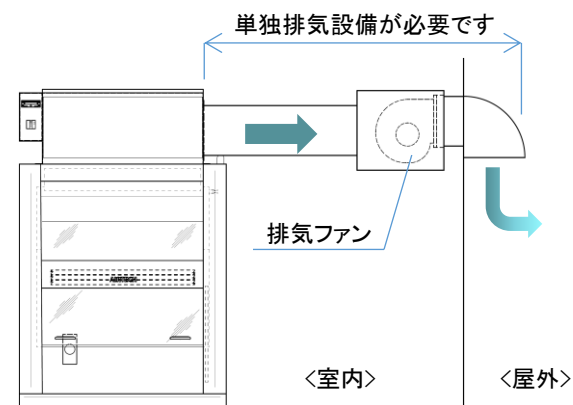


<設置時注意項>

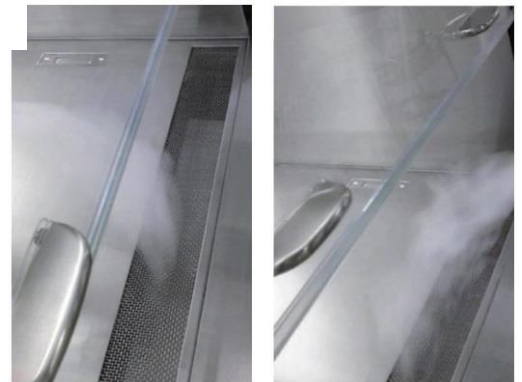

最適な気流により確実なエアバリアを形成。  
内部への流入及び外部への流出を防ぎます。

# 寸法図

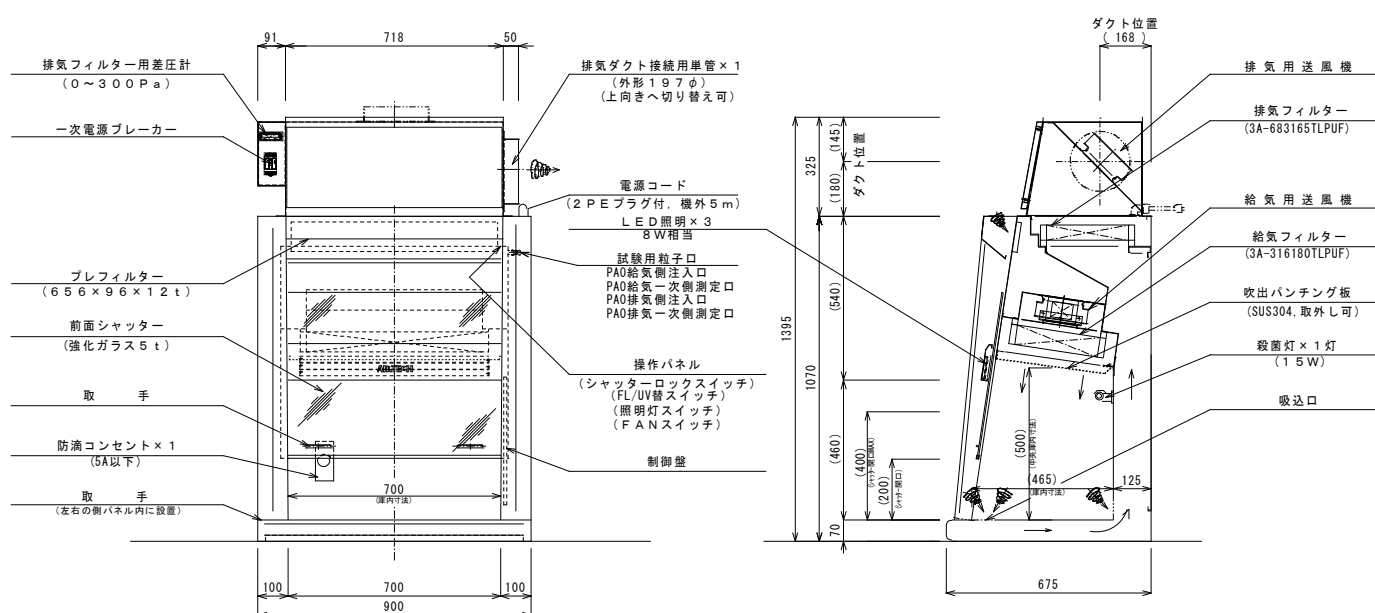

# 仕様

型 式	BHC-T700 II B2
集 塵 効 率	0.3μm 粒子 (PAO) にて 99.99% 以上
集 塵 要 素	給気/排気: HEPA フィルター プレフィルター: 不織布フィルター
処 理 風 量	給気: 5.7m <sup>3</sup> /min 排気: 9.8m <sup>3</sup> /min
吹 出 風 速	平均 0.30m/s
流 入 風 速	平均 0.53m/s
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz
消 費 電 力	約 250VA (ファン+照明運転時、コンセント容量は含まず)
重 量	約 105Kg
外 形 寸 法	W900×D675×H1395mm (ダクト右向き時)[庫内寸法 W700×D465×H500]
最 小 搬 入 寸 法	W900×D675×H1200mm (各寸法に 20mm 程度の余裕をみてください)
構 造 ・ 仕 上	本体: 鋼板製焼付塗装 作業室: ステンレス製
照 明	LED 8W×3 灯
殺 菌 灯	15W×1 灯 (インバーター式)
オ プ シ ョ ン	オートピペット、鋼板製専用架台、その他
そ の 他	別途密閉ダクト接続での室外排気設備をご用意下さい

● 上記の仕様は予告なく変更する場合がございます。

## 日本エアテック株式会社

本 社	〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号	TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615
東北営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号(オークツリー仙台)	TEL 022-268-2881 FAX 022-268-2883
中部営業所	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)	TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200
北陸営業所	〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)	TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753
関西営業所	〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)	TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827
中国営業所	〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)	TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505
九州営業所	〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸 3 丁目 6 番 29 号(クリエイト西公園ビル)	TEL 092-401-1595 FAX 092-401-1594
南九州出張所	〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショージャ 105 号)	TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <https://www.airtech.co.jp>



☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。

CE5006310-CV2117783