

AIRTECH

新型クリーンオーブン (AH0-530)

200°C仕様、ステップ運転、美観・メンテナンス性向上

・特徴

1. 200°C仕様

- ・ 200°Cにて±2°Cの温度分布精度

2. ステップ運転

- ・ プログラム温度調節計の採用により自由な運用が可能
- ・ 最大 16 パターン、16 ステップの登録が可能

3. 美観・メンテナンス性向上

- ・ 庫内 4 隅を R 形状にすることにより美観・メンテナンス性向上

4. キャスター、アジャスター標準装備

5. フィルター固定方法

- ・ ネジ固定方式からパチン錠方式へ変更し、工具が不要となりました



外観



操作部



庫内
(棚下 2 枚付属)




耐熱 HEPA フィルター



押え形状

仕様・寸法図

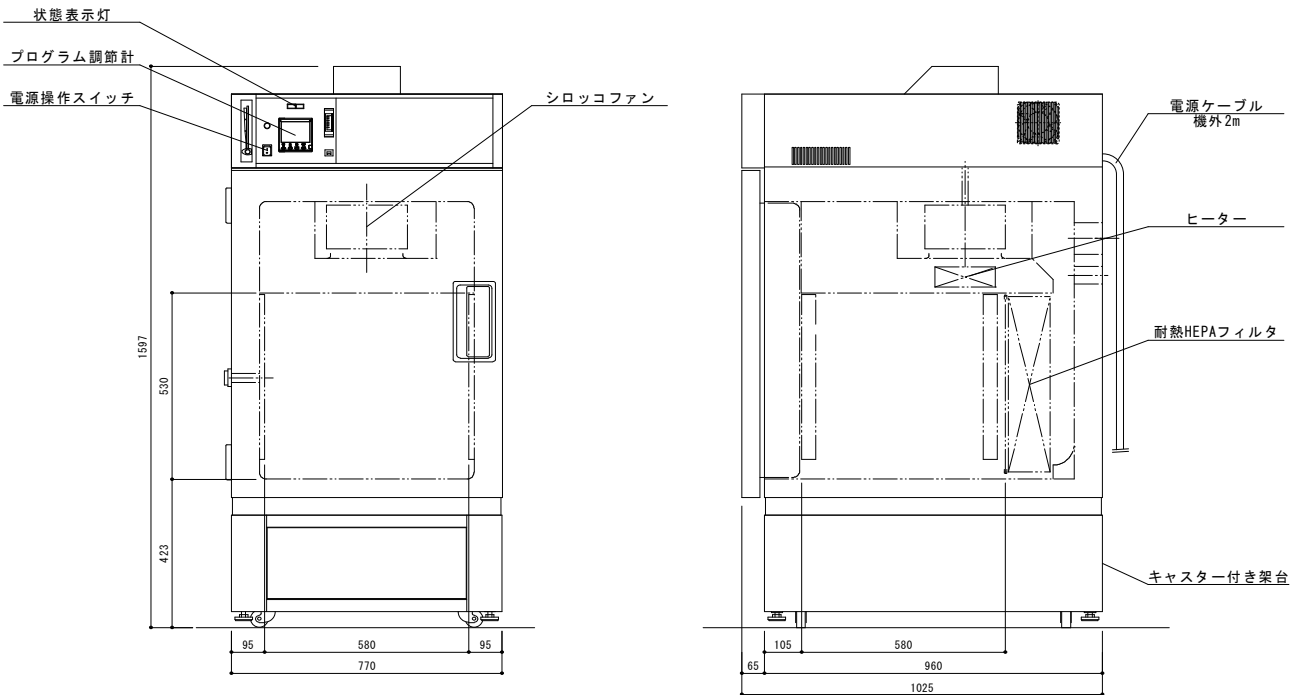

| | |
|-----------|---------------------------|
| 型式 | AHO-530 |
| 清浄度 | ISO クラス 5 温度安定時 総合効率にて |
| 温度範囲 | (外気温度+60)~200℃ |
| 温度分布 | ±2℃(200℃) |
| 外形寸法 | W770×D1025×H1597(キャスタ付架台) |
| 庫内寸法(内容量) | W580×D580×H530(178L) |
| 電源 | AC200V 3φ 30A(プレーカー容量) |
| 設備電力 | 約 8.0kVA(計算値による) |
| 塗色 | 本体:ホワイトグレー(ATC-7)、操作部:グレー |
| その他 | 電源ケーブル機外 2m(コンセントプラグは別途) |

日本エアーテック株式会社

本社 〒110-8686 東京都台東区入谷 1 丁目 14 番 9 号

東北営業所 〒980-0032 宮城県仙台市若林区荒井 7-12-5

中部営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 18 番 11 号(CK21 広小路伏見ビル)

北陸営業所 〒930-0005 富山県富山市新桜町 4 番 28 号(朝日生命富山ビル)

関西営業所 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津 1 丁目 11 番 11 号(第 1 リッチビル)

中国営業所 〒732-0825 広島県広島市南区金屋町 2 番 14 号(アフロディテビル)

九州営業所 〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸 3-6-29 クリエイト西公園 1F

静岡出張所 〒416-0922 静岡県富士市水戸島元町 5-14

熊本出張所 〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上一丁目 9-20

南九州出張所 〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央 3 丁目 38 番 28 号(ショーヤ 105 号)

TEL 03-3872-6611 FAX 03-3872-6615

TEL 022-352-4504 FAX 022-352-4507

TEL 052-219-7100 FAX 052-219-7200

TEL 076-471-7752 FAX 076-471-7753

TEL 06-6373-0473 FAX 06-6373-0827

TEL 082-568-7522 FAX 082-263-1505

TEL 092-401-1595 FAX 092-401-1594

TEL 0545-67-6262 FAX 0545-67-6363

TEL 096-288-6388 FAX 096-288-6389

TEL 0995-47-7422 FAX 0995-47-7433

URL: <https://www.airtech.co.jp>



☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。